

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Geburtshilfe – Obstetrics

Beckenzirkel

Pelvimeters

ET



DE LEE

ET005R

Beckenzirkel mit Zentimeter- und Zolleinteilung für innere Messungen zwischen Symphyse und Promontorium

Pelvimeter graduated in centimeters and inches for interior measurements between symphysis and promontory

1/2



MARTIN

ET073R

mit Zentimereinteilung graduated in centimeters

1/3



SCHMELZ

ET002

Rechenscheibe


Gestation calculator

1/3



Nach Applikation der Führungshülse am Injektionsort wird die Kanüle (mit aufgesetzter Spritze) durch den Trichter bzw. durch die Hülse hindurchgeführt und ins Gewebe eingestochen. Verletzungen der Vagina werden dabei vermieden. Die Einstichtiefe ist auf ca. 10 mm begrenzt. Ein Daumenring sowie eine kleine Stütze für Zeige- oder Mittelfinger dienen zur besseren Handhabung. Der Daumenring ist auf der Führungshülse verschiebbar und kann mit einer Rändelmutter – für jede Hand passend – fixiert werden. Die Fingerstütze läßt sich um die Führungshülse drehen und ermöglicht dadurch die Verwendung sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder. Außerdem kann die Fingerstütze – evtl. bei der Pudendusnästhesie – ganz aus dem Aktionsbereich heraus in Richtung Daumenring geschoben werden.

When the guide sheath is introduced at the spot to be injected the needle (mounted on the syringe) is passed through the guide sheath and the tissue is finally injected. Injuries of the vagina are thus avoided. Depth of puncture is limited to 10 mm. Thumb ring as well as a small support for middle- or forefinger facilitate the handling. Thumb ring slides on the guide sheath and can be fixed by a knurled nut to any size of the hand. The finger support can be turned round on the guide sheath so left-handers can use it, too. Completely away from the range of actions is the finger support when it is moved towards the thumb ring, e.g. for anesthesia of the pudendus.

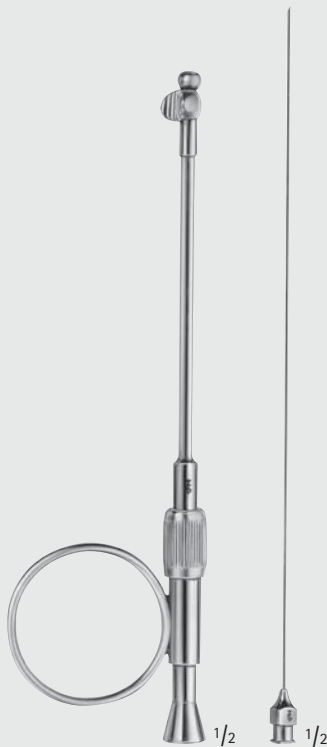

ET096R

Führungshülse
Guide sheath
175 mm, 7"

SR580R

Injektionskanüle Luer-Lock
Injection needle Luer-Lock hub
1,0 x 185 mm

Spezialbesteck zur transvaginalen
Injektion bei Paracervical-und
Pudendusnästhesie

Special set for transvaginal injection
for paracervical anesthesia as well
as anesthesia of the pudendus



Geburtshilfe – Obstetrics

Amniotom, Blasensprenger

Amniotome, Membrane Puncturing Forceps

Stethoskope für die Geburtshilfe siehe Rubrik AC

Obstetrical stethoscopes see section AC

ET




BEACHAM

ET102R

Amniotom

Amniotome

240 mm, 9 1/2"

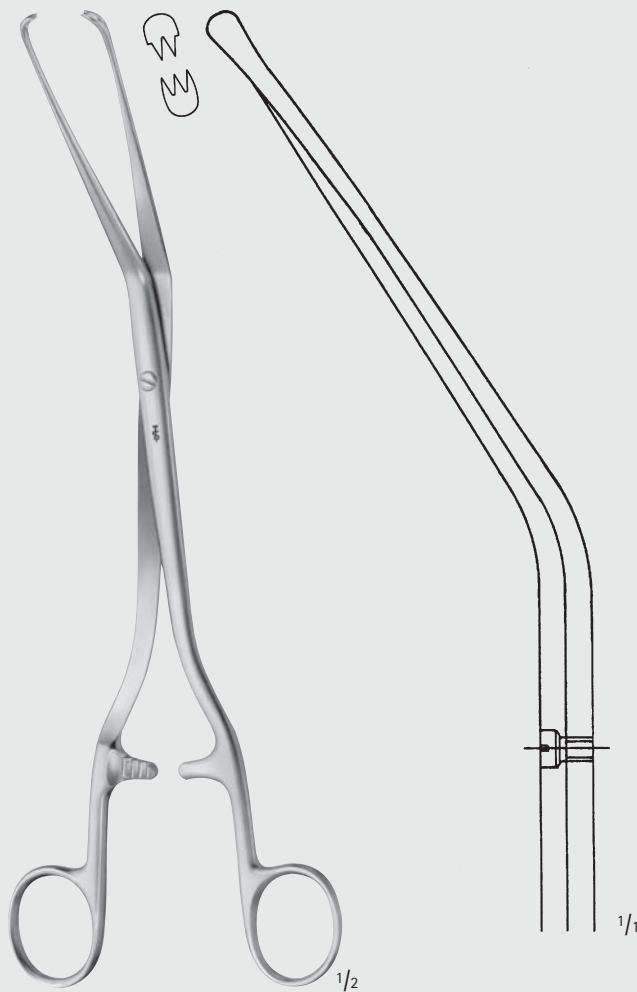

HERFF

ET106R


Blasensprenger

Membrane puncturing forceps

255 mm, 10"




Geburtshilfe – Obstetrics
 Nabelschnurscheren
 Umbilical Cord Scissors

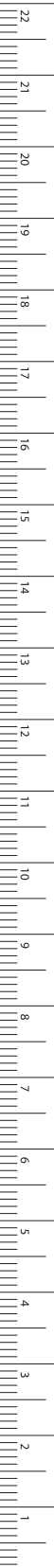

SCHUHMACHER

ET150R

Nabelschnurschere
 Umbilical cord scissors
 155 mm, 6"

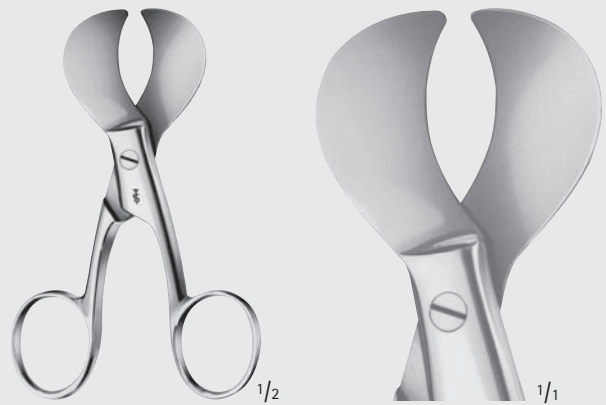

ET152R

Nabelschnurschere
 Umbilical cord scissors
 105 mm, 4 1/8"



BC796R

BC797R

BC796R	135 mm	5 1/4"
BC797R	160 mm	6 1/4"

Nabelschnurscheren
 Umbilical cord scissors

Geburtshilfe – Obstetrics

Dammscheren, Nabelschnurdilatator, Nabelschnurklemme

Episiotomy Scissors, Umbilical Dilator, Umbilical Cord Clamp



BRAUN-STADLER

ET140R 145 mm 5 3/4"

ET141R 200 mm 8"


Dammscheren

Episiotomy scissors



ET140R

1/1

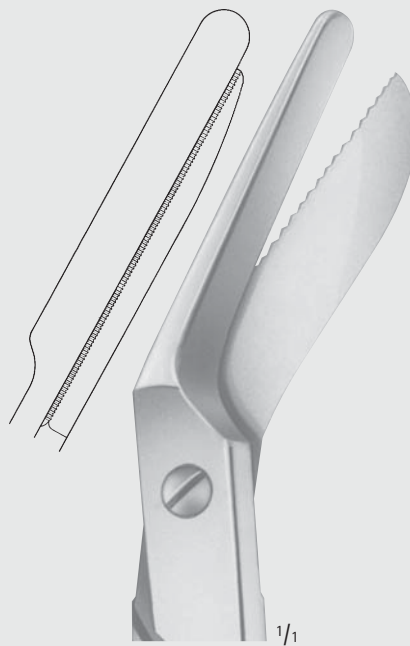

ET141R

1/1



ET142R

Dammschere
Episiotomy scissors
240 mm, 9 1/2"

1/1



1/1

ET130R

Nabelschnurdilatator
Umbilical dilator
95 mm, 3 3/4"



1/2

COLLIN

ET160R

Nabelschnurklemme
Umbilical cord clamp
85 mm, 3 3/8"

ET



INCHES




Geburtshilfe – Obstetrics

Vakuum-Extraktion bei der Geburtshilfe

Vacuum Extraction for Obstetrics

13

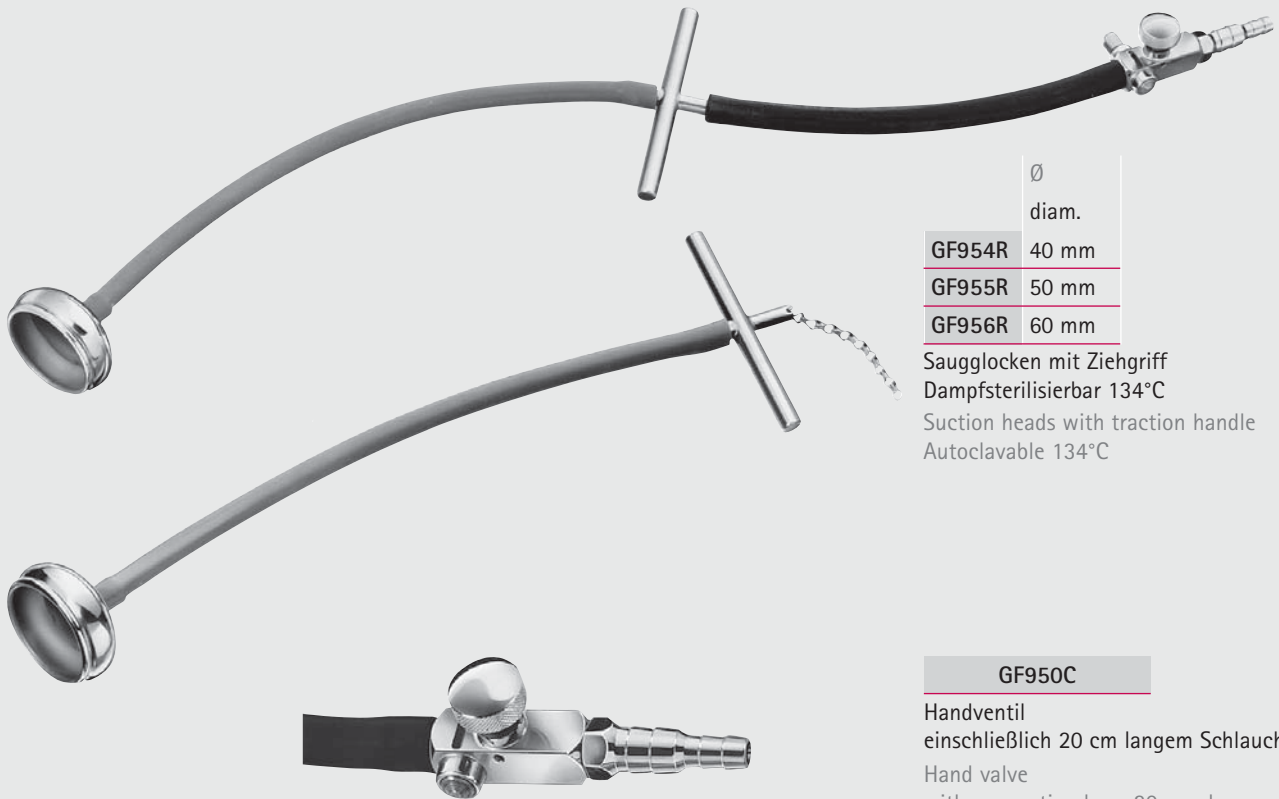

	Ø diam.
GF954R	40 mm
GF955R	50 mm
GF956R	60 mm

Sauglocken mit Ziehgriff
Dampfsterilisierbar 134°C
Suction heads with traction handle
Autoclavable 134°C

GF950C


Handventil
einschließlich 20 cm langem Schlauch
Hand valve
with connection hose 20 cms long

Mit dem Handventil GF950C können die Aesculap-Sauger auch zur Vakuum-Extraktion nach Malmström verwendet werden. Das Vakuum-Handventil GF950C ist auch an zentrale Sauganlagen anschließbar.

With the hand valve GF950C Aesculap electric suction pumps can also be used for Malmström vacuum extraction. The vacuum hand valve GF950C can also be connected to central suction system.

Funktionsweise: Das benötigte Vakuum ist durch die Regulierschraube beliebig voreinstellbar und veränderbar und besteht bis zum geschlossenen Stoppschieber. Sobald man den Stoppschieber öffnet, d.h. von links nach rechts drückt, wird die aufgesetzte Saugglocke unmittelbar unter das eingestellte Vakuum gesetzt. Zum sofortigen Absetzen der Saugglocke braucht der Stoppschieber nur geschlossen zu werden, wodurch das Vakuum der Saugglocke spontan zusammenbricht, während das Vakuum in der Saugflasche voll erhalten bleibt und nicht immer wieder zeitraubend neu aufgebaut werden muß.

Function: The vacuum required can be constantly preset by the adjusting screw. This vacuum exists then up to the closed quick-shutter, thus the vacuum in the suction head is pressed from the left to the right, the mounted suction head is immediately put under the preset vacuum. In case the preset vacuum has to be changed, this can be done with the adjusting screw. For immediate removal of the suction head simply close the quick-shutter, thus the vacuum in the suction head is eliminated at once whereas the vacuum in the suction jar remains unchanged.

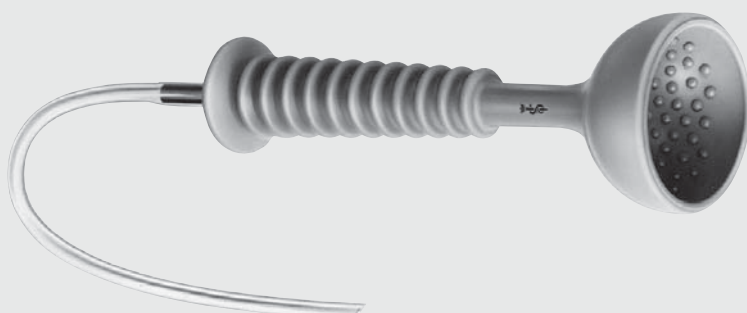

GF957

Saugglocke aus Silicon-Gummi, Ø 60 mm,
mit 1,5 m Siliconschlauch
Dampfsterilisierbar 134°C
Suction head, made of silicone, 60 mm diam.,
with silicone tube 1.5 m long
Autoclavable 134°C




MILLIMETERS

Geburtshilfe – Obstetrics

Geburtszangen

Obstetrical Forceps

ET

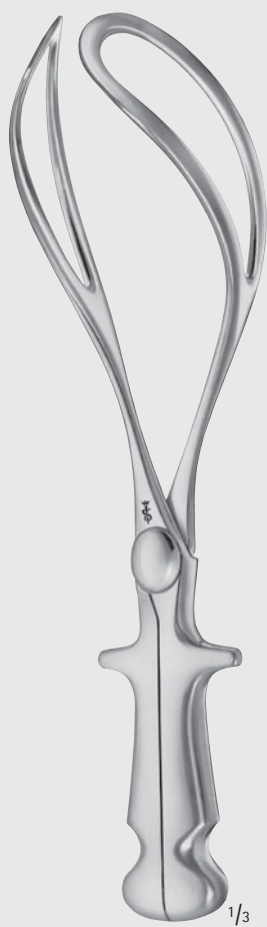

NÄGELE

ET205R

355 mm, 14 1/8"



KIELLAND

ET210R

420 mm, 16 3/4"

INCHES



Geburtshilfe – Obstetrics
Geburtszangen
Obstetrical Forceps



SIMPSON-BRAUN

ET220R

305 mm, 12"



SIMPSON-BRAUN

ET221R


350 mm, 14"



PIPER

ET237R

für nachkommenden
Kopf bei Steißblagen
for delivery of the after
coming head in breech
presentation
445 mm, 17 1/2"

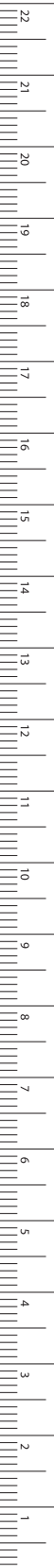

MILLIMETERS

Geburtshilfe – Obstetrics

Geburtszangen

Obstetrical Forceps

ET



SIMPSON

ET245R

für sectio caesarea
(Schnittentbindung)
for caesarean section

235 mm, 9 1/4"



WRIGLEY

ET246R

für sectio caesarea
(Schnittentbindung)
for caesarean section

250 mm, 10"



Geburtshilfe – Obstetrics
Geburtszangen
Obsterical Forceps



1/3

TARNIER

ET251R

mit Achsenzugvorrichtung
with traction rod
400 mm, 16"



1/3

BARNES-NEVILLE

ET255R

mit Zugvorrichtung
with traction handle
435 mm, 17"



MILLIMETERS

Geburtshilfe – Obstetrics

Geburtslöffel, Uterus-Klemmzange

Obstetrics Lever, Caesarean Section Hemostatic Forceps


ET



SELLHEIM

ET270R

Geburtslöffel
Obstetric lever
300 mm, 12"

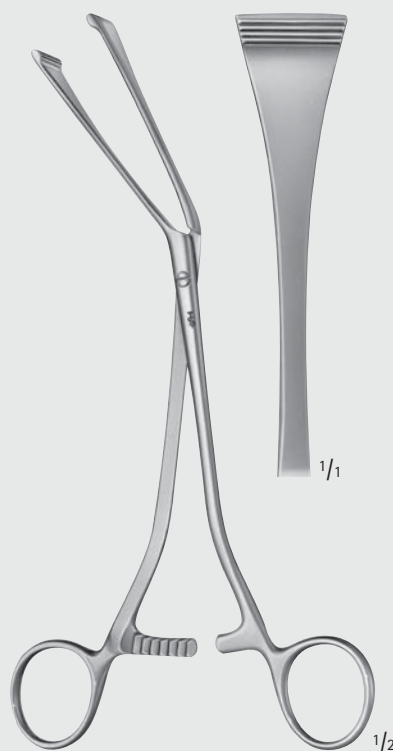

GREEN-ARMYTAGE

ET268R

Uterus-Klemmzange, abgewinkelt,
zur Blutstillung an den Schnitt-
rändern im unteren Segment bei
Kaiserschnitt-Entbindungen

Caesarean section hemostatic
forceps, angled,
for edges of the transverse
incision in the lower segment


195 mm, 7 3/4"



Geburtshilfe – Obstetrics

Uterus-Klemmzange, Kopfschwartenzange
Caesarean Hemostasis Forceps, Scalp Flap Forceps

13

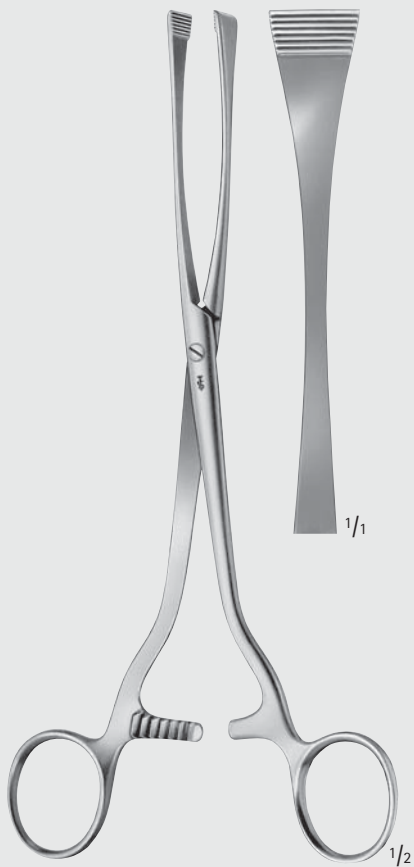


GREEN-ARMYTAGE

ET269R

Uterus-Klemmzange zur Blutstillung an den Schnitträndern im unteren Segment bei Kaiserschnitt-Entbindungen

Caesarean section haemostatic forceps, for edges of the transverse incision in the lower segment

220 mm, 8 ³/₄"

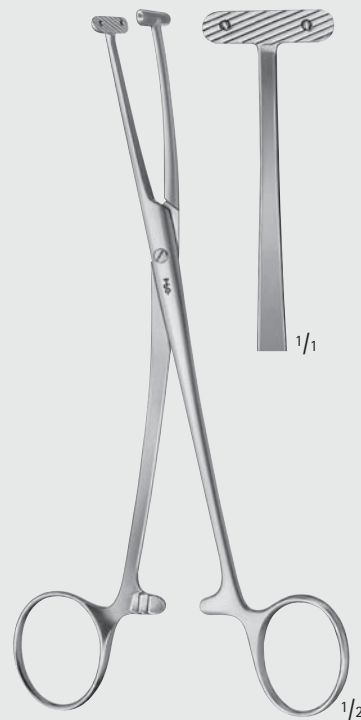

WILLETT

FF011R

Kopfschwartenzange

Scalp flap forceps

185 mm, 7 ¹/₄"



MILLIMETERS

Geburtshilfe – Obstetrics
 Plazentar- und Abortuszangen
 Placenta- and Ovum Forceps

ET



Fig. 1 Fig. 2 ^{1/1}

ET301R ET302R



Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 ^{1/1}

ET306R ET307R ET308R



Fig. 2 Fig. 3 ^{1/1}

ET315R ET316R



WINTER ^{1/2}

ET301R-ET302R

290 mm, 11 1/2"



WINTER ^{1/2}

ET306R-ET308R

290 mm, 11 1/2"



WINTER ^{1/2}

ET315R-ET316R

mit Sperre
 with ratchet
 290 mm, 11 1/2"




Geburtshilfe – Obstetrics
Plazentar- und Abortuszangen
Placenta- and Ovum Forceps



SAENGER

ET325R


285 mm, 11 1/4"

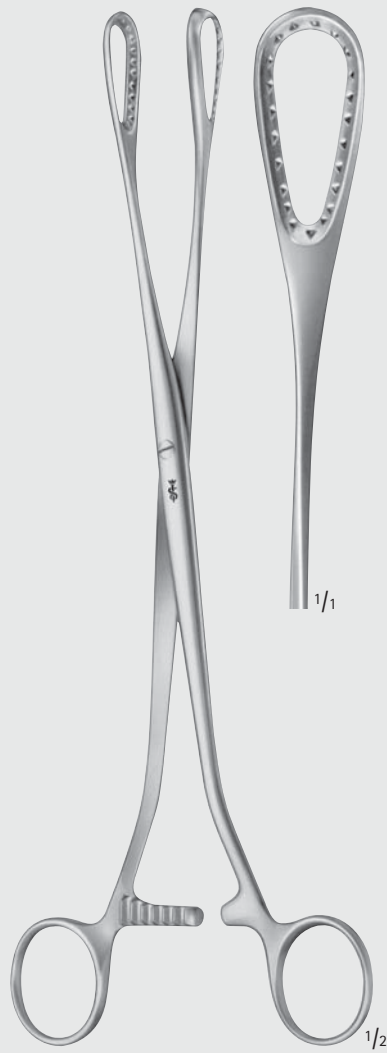

SAENGER

ET326R

275 mm, 10 3/4"

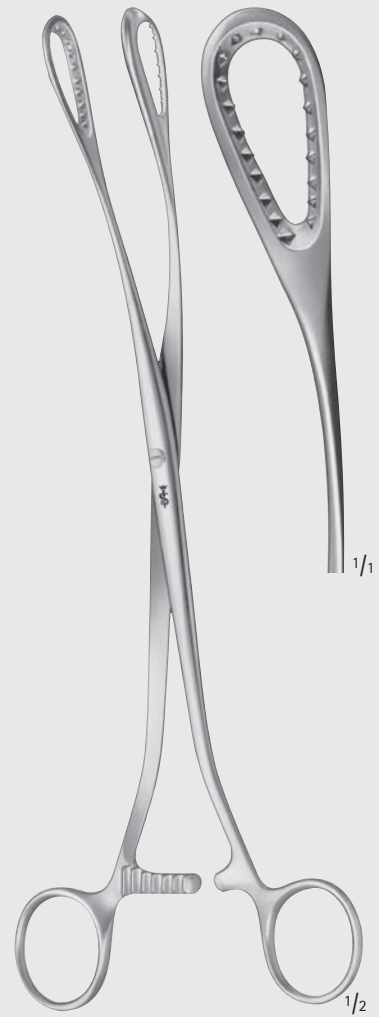

SAENGER

ET327R

265 mm, 10 1/2"



Geburtshilfe – Obstetrics
Plazentar- und Abortuszangen
Placenta- and Ovum Forceps

ET




mit Schutzklappe
with protecting cap



AESCULAP

ET320R

285 mm, 11 1/4"

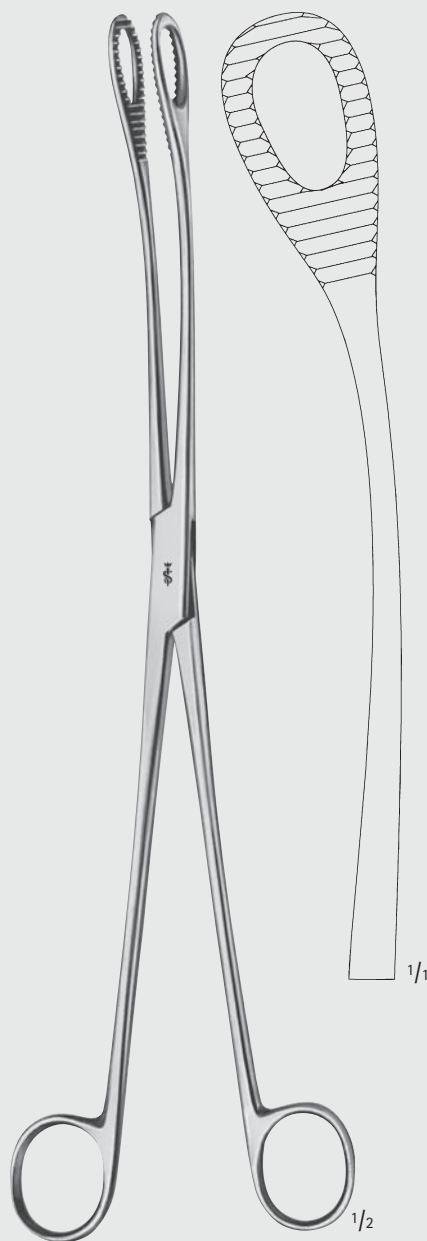

KELLY


BF135R

320 mm, 12 3/4"




Geburtshilfe – Obstetrics
Plazentar- und Abortuszangen
Plazenta- and Ovum Forceps

13

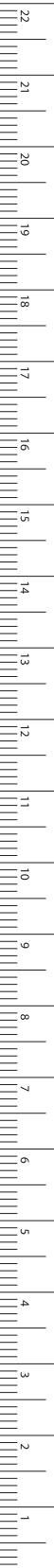

MILLIMETERS

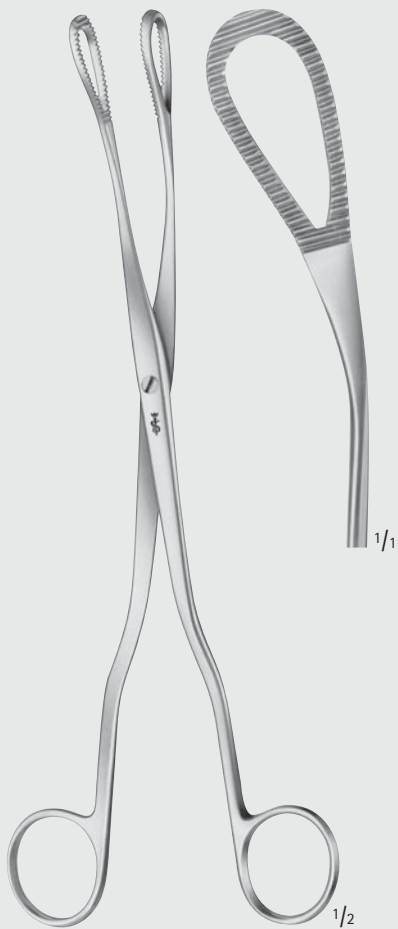

MC CLINTOCK

ET329R

240 mm, 9 1/2"

FF010R


DEMARTEL Scalp Flap Clamp, 135 mm (5 1/4"), serrated, non-sterile, reusable



Product search type	Scalp Flap Clamp
Author	DEMARTEL
Aesculap Product	
Groups	General Surgical Instruments
Length	135.00 mm
Length (Inch)	5 1/4
Jaw profile	serrated
Discipline	Neurosurgery
Surgical Step	Diss.-Tissue-Others
Data Matrix	Yes
Product contains	
Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable /	
Reusable	reusable

BF136R

KELLY Sponge Forceps, curved, 320 mm (12 1/2"), serrated, fenestrated, box lock, with ratchet, non-sterile, reusable

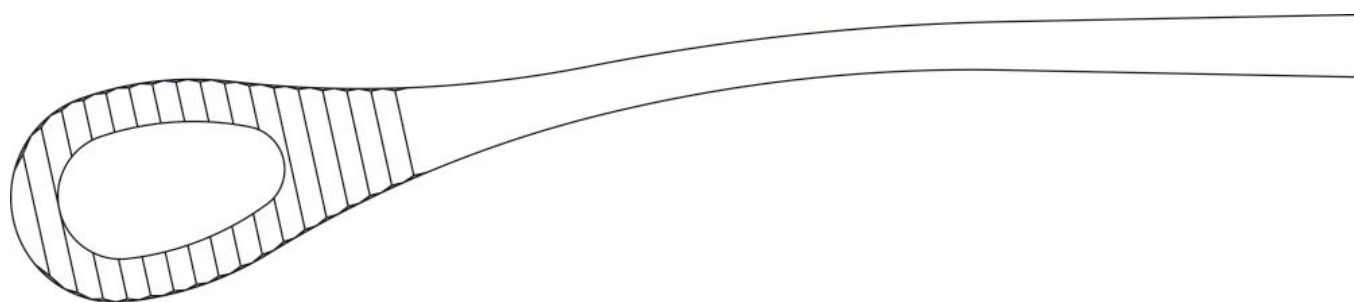

Product search type	Sponge Forceps
Author	KELLY
Aesculap Product	
Groups	General Surgical Instruments
Altern.	
Productname	Polyp forceps, Organ grasping Forceps
Geometry	curved
Length	320,00 mm
Length (Inch)	12 1/2
Blades / Jaw	fenestrated
Jaw profile	serrated
Instrument joint	box lock
Ratchet	with ratchet
Discipline	General Surgery, Gynaecology, Hand / Foot Surgery, Cardiac Surgery, Maxillo-Facial Surgery, Neurosurgery, Orthopaedics, Pediatric Surgery, Plastic Surgery, Spine Surgery, Thoracic Surgery, Traumatology, Urology, Vascular Surgery, Ear-Nose-Throat Surgery
Surgical Step	Disinfection
Type of Sterilization	not sterilized ex works
Data Matrix	Yes
Product contains	
Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable /	
Reusable	reusable

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	